

## 機械器具(21)内臓機能検査用器具

一般医療機器 単回使用パルスオキシメータプローブ 31658000

## ディスポオキシプローブ TL-271T3

## 再使用禁止

## 禁忌・禁止

## 使用方法


- 本プローブは未滅菌品で、かつ、ディスポーザブル製品です。使用は一人の患者に限定し、他の患者に使用しないでください。[交差感染を引き起こします。]

## 併用医療機器[相互作用の項参照]

- 磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)

## 形状・構造および原理等

本品は、パルスオキシメータに使用する使い捨てのプローブです。本品は、Dサブコネクタタイプです。

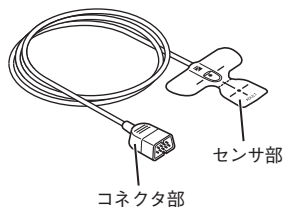

対象体重(目安)	装着部位
成人(30kg以上)	手の指、足の趾

## 材質

センサ部 ポリエステル

## 寸法・質量

ケーブル長 1600 ±100mm  
質量 30 ±10g (コネクタ含む)

## 原理

本品は、発光部として中心発光波長660nmと940nmの2個の発光ダイオード、受光部としてフォトダイオードを持ち、この発光部と受光部の間に測定部位をはさみ、測定部の血流の変化によって得られる2種類の光電脈波信号を得ます。

## 使用目的、効能または効果

## 使用目的

患者の手指、足などの部分に使用し、皮膚を通して光を照射し、動脈組織血中のオキシヘモグロビンおよびデオキシヘモグロビンによって吸収される光量を検知するために用いる用具です。親機で信号が受信され、結果が表示されます。本品は単回使用です。

## 品目仕様等

## 測定精度

80% SpO<sub>2</sub> ≤ SpO<sub>2</sub> ≤ 100% SpO<sub>2</sub> ±2% SpO<sub>2</sub>  
70% SpO<sub>2</sub> ≤ SpO<sub>2</sub> < 80% SpO<sub>2</sub> ±3% SpO<sub>2</sub> ※rms表記

ただし、70% SpO<sub>2</sub>未滿は規定せず。

測定精度保証環境温度 : 18~40℃

## 安全性

BF形装着部

## 操作方法または使用方法等

詳細は別途用意されている取扱説明書を参照してください。

## 装着位置

本プローブは透過型です。光を透過するように、定められた部位(「形状・構造および原理等」の項参照)にプローブを装着してください。装着部位の厚みは以下の範囲で測定が可能です。

接続機種または中継コード	装着可能な部位の厚み
下記を除く接続機種または中継コード	6~18mm
ベッドサイドモニター:BSM-7100、BSM-3100、BSM-2000 ヘッドアンプ:AL-801P	6~14mm
ベッドサイドモニター:BSM-2100 パルスオキシメータ:OLV-1100、OLV-1200 ヘッドアンプ:AL-800P	9~14mm

## 装着方法

1. 本品のコネクタ部をモニター装置に直接、または中継コードを介して接続します。  
本品と組み合わせて使用するモニター装置として、下記のモニター装置があります。  
製造販売業者はすべて日本光電工業株式会社です。

以下の中継コード/ケーブルを介して接続するモニター装置  
JL-900P、JC-024P、JC-025P、JL-302T、JL-211V、JL-201T

## 下記モニター装置

販売名	医療機器承認/認証番号
SpO <sub>2</sub> アダプタ JLシリーズ	21300BZZ00615000
SpO <sub>2</sub> アダプタ JL-5シリーズ	220ADBZX00109000
ポリグラフ PEG-2000	21500BZZ00491000
携帯用睡眠時無呼吸検査装置 SAS-2100	21700BZZ00301000
半自動除細動器 TEC-2500シリーズ カルジオライフS	22000BZX00119000
デフィブリレータ TEC-7500シリーズ カルジオライフ	20800BZZ00840000
携帯型救急モニタ WEC-5003 ライフメイト	20800BZZ00458000
携帯型救急モニタ WEC-6003 ライフメイト	21500BZZ00724000
ポケットSpO <sub>2</sub> モニタ WEC-7201 オキシバルブチ	218AHBZX00017000
送信機 ZB-831P	20600BZZ00740000
送信機 ZB-861P	20700BZZ00942000
送信機 ZB-930P	21200BZZ00754000

※表は次ページへ続きます。

0654-902198

TL-271T3の取扱説明書を必ずご参照ください。

送信機 ZM-930P	21500BZZ00226000
送信機 ZM-940P	21900BZX00614000
送信機 ZS-530P	22100BZX00998000
送信機 ZS-930P	21500BZZ00225000
送信機 ZS-940P	21600BZZ00075000

2. 装着部位の汚れを拭き取ります。
3. プローブの剥離紙をはがして装着部位に装着します。
4. 接続されているモニタ装置で、脈波とSpO<sub>2</sub>を確認します。

## 廃棄

使用済みのプローブは、医療廃棄物として、専門の業者に依頼して廃棄処理してください。

## 使用上の注意

### 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- ・高齢者、意識のない患者、末梢循環不全を起こしている患者、高熱の患者[センサの位置を頻繁に変えてください。プローブの装着部位は通常2~3℃温度が上昇するため、熱傷を生じることがあります。また、装着部位で圧迫壊死を生じることがあります。]
- ・以下の場合は、正しく測定できない可能性があります。
  - ・異常ヘモグロビンの量が多すぎる患者(CO<sub>Hb</sub>、MetHb)
  - ・血液中に色素を注入した患者
  - ・CPR処置をしている患者
  - ・静脈拍動がある部位で測定している場合
  - ・体動がある患者
  - ・脈波が小さい患者
- ・Photo Dynamic Therapy (光線力学療法)中の患者[プローブの照射光により、プローブ装着部で熱傷が起こる可能性があります。Photo Dynamic Therapyは、光反応性をもつ薬剤を投与し、光過敏性の副作用があります。]

### 重要な基本的注意

- ・本品を適用機種以外の装置に接続しないでください。[患者が熱傷を負うことがあります。]
- ・破損、分解したプローブは使用しないでください。[正しい値が得られないだけでなく、患者が怪我をすることがあります。]
- ・経時変化により劣化したプローブは使用しないでください。[正しい値が得られないことがあります。]
- ・本プローブを水や消毒剤に浸さないでください。
- ・本品は患者に誤飲される(かじる・飲み込む)おそれがあるため注意してください。[もし、上記の事態が発生もしくはそのような兆候が見られた場合は、部品が消化器官に滞留し、患者が食物を受け付けない事態(嘔吐など)が発生することが予想されます。さらに腹痛や下痢の症状が発生することも予想されます。]
- ・誤飲を防止するため、プローブの外観異常(形状異常・部品欠損)がないことを常に確認するなど十分に注意してください。
- ・プローブのケーブルは、以下のことに注意して扱ってください。[ケーブルが断線あるいはショートして、患者が熱傷を負うことがあります。また、正しい値が得られない可能性があります。]この場合は、新しいプローブと交換してください。
  - ・強く引っ張ったり、無理に折り曲げない。
  - ・キャスト等で踏みつけない。
- ・少なくとも8時間ごとに装着部位の皮膚状態を確認のうえ、装着部位を変えてください。[SpO<sub>2</sub>プローブの装着部位は通常2~3℃温度が上昇するため、熱傷を生じることがあります。また、装着部位で圧迫壊死を生じることがあります。]
- ・本プローブで推奨する厚みの部位にプローブを装着しても、たびたび、装着部位の確認を表すメッセージが表示される時は、プローブの劣化が考えられます。この場合は、プローブを交換してください。
- ・プローブが外れたり、ずれたりした場合、「プローブ確認」以外のメッセージが表示されたり、まれに誤った測定値が表示されることがあります。
- ・通常の使用では、光の影響はほとんど受けませんが、特に強い光(手術灯、太陽光など)の当たる場所で使用する場合は、毛布などで光を遮るようにしてください。[測定精度に影響を与えます。]

- ・本プローブの使用により、まれに皮膚の発赤やかぶれなどの過敏症状が現れることがあります。特に、皮膚の弱い患者に使用する場合は注意が必要です。このような症状が現れたときは装着位置を変えるか、使用を中止してください。
- ・非観血圧測定用のカフが巻いてある肢(腕または足)、または測定用のカテーテルが挿入されている肢で測定すると、プローブ装着部位の血流に影響があり、正しく測定できない場合があります。プローブは末梢の血流に影響がない肢の指などに装着してください。
- ・プローブを装着する際は、強く巻きすぎないように十分に注意してください。同時に、センサの装着部位より末梢側にうっ血が生じていないかなど、常に血流をチェックしてください。プローブは装着部全面の粘着剤で固定されるため、強く巻くことなく、十分な固定が可能です。[強く巻きすぎると、短時間の装着でも血流を阻害し、圧迫壊死および熱傷を生じることがあります。また、血流の阻害で正しく測定できないことがあります。]
- ・ケーブルが患者からなるべく離れるようにして使用してください。[体動によりケーブルが患者に巻き付き、けがをする場合があります。]ケーブルが巻き付いた場合には、すみやかにほどいてください。
- ・装着部位が血液などで汚れていたり、患者がマニキュアをしているときは、汚れやマニキュアを落としてからプローブを装着してください。[血液やマニキュアによっては透過光が減少し、測定誤差を生じたり、測定できないことがあります。]
- ・装着したプローブを測定部からははずす際、プローブのケーブルを引っ張らないでください。[ケーブルが断線することがあります。]
- ・細い指では「プローブ確認」を表示し、測定できないことがあります。
- ・皮脂の多い部位に装着すると、粘着力が弱まりプローブがはがれやすくなるため注意してください。
- ・プローブの発光部中心と受光部中心が装着位置をはさんで対向するように装着してください。[対向する位置にない状態では、正しく測定できません。]
- ・プローブを装着する際、プローブの上から重ねてテープ、特に伸縮性の高いテープを使用して固定しないでください。[短時間の装着でも血流を阻害し、圧迫壊死および熱傷を生じることがあります。また、血流の阻害で正しく測定できないことがあります。]
- ・装着したプローブを測定部からははずす際は、ゆっくりはがしてください。[テープの粘着力により皮膚を痛めることがあります。]

### 相互作用(併用禁忌・禁止:併用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
磁気共鳴画像診断装置(MRI装置)	MRI検査を行うときは、本品を患者から取り外すこと	誘導起電力により局所的な発熱で患者が熱傷を負うことがある 詳細は、MRI装置の取扱説明書の指示に従うこと

### 相互作用(併用注意:併用に注意すること)

#### 電気手術器(電気メス)

- ・SpO<sub>2</sub>が正しく測定できない場合があります。[電気メスのノイズ]

#### 妊婦、産婦、授乳婦および小児等への適用

- ・新生児にプローブを装着する際は、強く巻きすぎないように特に注意してください。同時に、センサの装着部位より末梢側にうっ血が生じていないかなど、常に血流をチェックしてください。プローブは装着部全面の粘着剤で固定されるため、強く巻くことなく十分な固定が可能です。[強く巻きすぎると、短時間の装着でも血流を阻害し、圧迫壊死および熱傷を生じることがあります。また、血流の阻害で正しく測定できないことがあります。]
- ・新生児は、症状および程度に応じてセンサの装着部位をより頻繁に変えてください。[新生児は皮膚が未熟であり、SpO<sub>2</sub>プローブの装着部位は通常2~3℃温度が上昇するため、熱傷を生じることがあります。また、装着部位で圧迫壊死を生じることがあります。]
- ・装着部位の変更などでプローブをはがすとき、新生児の皮膚は敏感なので、注意してゆっくりはがしてください。

## 貯蔵・保管方法および使用期間等

### 使用環境条件

温度範囲 0～45℃  
(ただし、SpO<sub>2</sub>精度保証環境温度は18～40℃)  
湿度範囲 30～95%  
気圧範囲 700～1060hPa

### 保管・輸送環境条件

温度範囲 -20～65℃  
湿度範囲 10～95%  
気圧範囲 700～1060hPa

### 耐用期間

本品は消耗品です。開封時に傷、破損があった場合、材料に変質が見られた場合は、無償交換いたします。

## 包装

- ・5本入り／箱
- ・24本入り／箱

製造販売 **日本光電** 日本光電工業株式会社  
東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560  
☎(03) 5996-8000(代表) Fax(03) 5996-8091

製造業者 **日本ビニールコード株式会社**